


22.07.2015г.

УТВЪРЖДАВАМ
ДИРЕКТОР:
/ст.н.с.д-р М. Моллова/

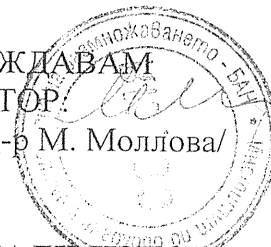

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ХИМИКАЛИ ИЗПОЛЗВАНИ В ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО "акад.К.Братанов"

Общи положения:

- Ръководителят на секцията е длъжен своевременно да актуализира инструкциите за безопасност на труда. За целта при въвеждането на нови методика, включваща нови химикали, които не са били използвани по рано в работата на групата, инициаторът е длъжен да уведоми ръководителят и членовете на групата затова, както и за възможните негативни въздействия върху здравето от използването на тези химикали.
- Всички опасни течности се засмукват само с пипети с бутало/Ризила/
- Забранява се съхраняването на химикали в стъкленици без етикети.
- При работа с химикали сътрудниците и специалистите да са облечени задължително в бели престилки или друго , използвано специално за целта работно облекло.
- При организирането на временни лаборатории при провеждане на теренни изследвания да се съблюдават същите правила за безопасност, както и условията на постоянните лаборатории. Да не се допуска използването на временни лаборатории като спални помещения!

Работа с химикали свързани с обработката на хелминтологични материали

- Банките за съхранение на хелминтологични материали да са с шлифовани стъклени запушалки. В случай , че се използват банки с пластмасови капачки, на последните задължително да се поставят линолеумни уплътнители.
- Банки с хелминтологични материали да не се съхраняват дългосрочно в работни помещения. За целта да се използва помещение в приземния етаж или металните шкафове в коридора.
- При работа с банки с хелминтологичен материал да се съблюдава те да се затварят веднага след изваждане на необходимите материали.
- При работа с хелминтологичен материал в консервираща течност /70% етанол или течност на Барбагало съдържаща 2% формалдехид/ той да се преглежда само в добре затварящи се петриевы стъкла. Всички процедури при подготовка на препарати /багрене, диференциране, обезводняване, просветляване и др./ да се извършват в добре затварящи се петриевы стъкла или покрити с покривни стъкла стъклени напръстници.